



HAGMANN

...where technology is lived

filtered 
milled 
cleaned 
packaged 

Hagmann - where technology is cleaned

Des systèmes performants
pour le nettoyage et la
désinfection industriels

Hagmann est votre partenaire agréé en Suisse de :

KEN HYGIENE SYSTEMS






KEN IQ3



Le laveur-désinfecteur IQ3 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences d'un processus de nettoyage efficace et professionnel dans un espace réduit, sans pour autant compromettre la qualité du processus, le temps de cycle ou les performances de l'appareil.

Ce modèle peut être programmé spécifiquement pour répondre à vos besoins.

- Séchage par soufflerie d'air chaud avec un filtre HEPA H14
- Peut être installé comme modèle sous table
- KEN IQ3 dispose d'une porte manuelle qui sert de plateau de chargement.
- Consommation minimale d'eau, de produits chimiques et d'électricité
- Mémoire de programmes avec jusqu'à 40 programmes différents
- Flexible avec un grand choix de supports de lavage et d'accessoires
- Armoire latérale intégrée pour les récipients de produits chimiques

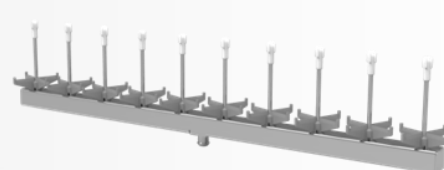
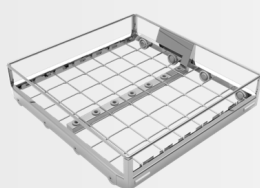
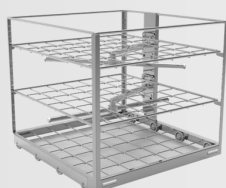


KEN IQ4

Le KEN IQ4 fait partie de la nouvelle génération de laveurs-désinfecteurs développée par KEN HYGIENE SYSTEMS. Il est spécialement conçu pour être utilisé dans des locaux où l'espace est limité.

La machine est disponible en version manuelle avec une ou deux portes. Les doubles portes assurent une barrière efficace entre le côté sale et le côté propre.

- L'installation au format NULLGAP permet d'installer 3 machines sur 2m
- Hauteur de chargement ergonomique de 750 mm pour un chargement facile
- Version à une ou deux portes
- Temps de processus courts
- Écran tactile en option
- Faible niveau sonore
- Racks avec jusqu'à 4 étages
- Consommation minimale d'eau, de produits chimiques et d'électricité
- Mémoire de programmes avec jusqu'à 40 programmes différents
- Flexible avec un grand choix de supports de lavage et d'accessoires.

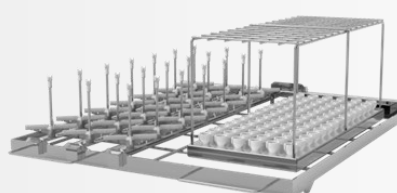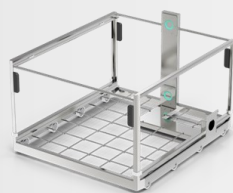
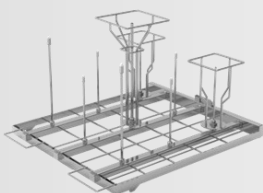


KEN IQ5 & IQ6

La série KEN IQ5 fait partie de la dernière génération de laveurs-désinfecteurs de KEN HYGIENE SYSTEMS. Leur grande capacité, leur flexibilité et leur rapidité garantissent la mise en œuvre de processus optimaux, fiables et sûrs au coût le plus bas.

Le grand choix de dispositifs de chargement flexibles disponibles pour les séries IQ5 et IQ6 a été conçu pour nettoyer une grande variété de produits.

- L'installation au format NULLGAP permet d'installer 3 machines sur 2m
- KEN IQ5 disponible avec porte abattante ou porte coulissante KEN IQ6 avec portes coulissantes
- Écran tactile de 7"
- Racks avec jusqu'à 6 étages
- Surveillance du dosage avec flowmeter
- Hauteur de chargement ergonomique de 750 mm pour un chargement facile
- Reconnaissance RFID pour un démarrage automatique du cycle
- Temps de processus court
- Consommation minimale d'eau, de produits chimiques et d'électricité
- Mémoire de programme avec jusqu'à 40 programmes différents
- Flexible avec un grand choix de supports de lavage et d'accessoires

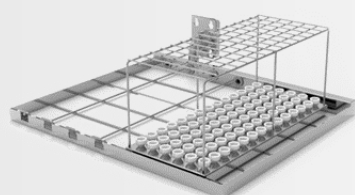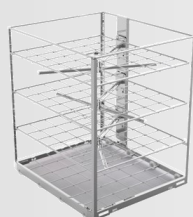




IQ5



IQ6



Spécifications techniques

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Facile à utiliser ✓ Facile à entretenir ✓ Facile à choisir 			
KEN	IQ3	IQ4	IQ5 / IQ6
Dimensions extérieures	H: 840 x L: 600 x P: 630 mm	H: 1790 x L: 600 x P: 700 mm	IQ5 H: 1985 x L: 662 x P: 712 mm IQ6 H: 1985 x L: 820 x P: 936 mm
Dimensions de la chambre de lavage	H: 470 x L: 530 x P: 550 mm	H: 550 x L: 540 x P: 610 mm	IQ5 H: 690 x L: 550 x P: 610 mm IQ6 H: 690 x L: 705 x P: 850 mm
Poids	147kg	218kg	IQ5 303kg IQ6 340kg
Volume utile	137 L	181 L	IQ5 231 L IQ6 413 L
Volume total de la chambre de lavage	175 L	226 L	IQ5 256 L IQ6 497 L
Capacité	Jusqu'à 4 étages	Jusqu'à 4 étages	Jusqu'à 6 étages
Temps de cycle standard	30-80 min	25-60 min Réservoir de préchauffage en option	20-45 min Réservoir de préchauffage en option
Raccord d'évacuation d'air	Condensateur intégré	ø60 mm / 84m ³ /h	IQ5 ø100mm / 250 m ³ /h IQ6 ø100mm / 385 m ³ /h
Raccords d'eau	1 x 3/4" (le 2e est en option)	2 x 3/4" (le 3e est en option)	2 x 3/4" (le 3e est en option)
Niveau de pression acoustique	<60 dB	<60 dB	<60 dB
Consommation d'eau par phase	8-14 L	12-15 L	12-15 L
Alimentation électrique	3x400V AC 50Hz 7kW	3x400V AC 50Hz 7-13 kW	IQ5 3x400V AC 50Hz 7-13 kW IQ6 3x400V AC 50Hz 11-26 kW
Programmes disponibles	40 Programmes	40 Programmes	40 Programmes
Écoulement	ø32 mm	ø50 mm	ø50 mm

Aperçu des avantages des machines de nettoyage KEN

Environnement :

- Faibles coûts énergétiques
- Faible niveau sonore
- Faible consommation de produits chimiques
- Consommation d'eau minimale

Sécurité hygiénique :

- Testé selon la norme EN 62366
- EN ISO 15883-1-2-5
- Facile à nettoyer
- Surfaces en verre
- Processus validables

Technologie :

- Reconnaissance RFID
- Chargement/déchargement manuel
- Accès au service par le front
- Accès de maintenance à distance

Aperçu HAGMANN TEC AG :

- # La qualité intelligente de KEN combinée à la compétence technique de Hagmann Tec SA
- # Équipe de service avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du nettoyage / désinfection
- # Vos exigences sont notre motivation
- # Derrière Hagmann Tec SA se trouve une équipe jeune, motivée et hautement qualifiée
- # Nous vivons la technologie ❤️
- # 100 % Swissness

Notre site:



Reserved to technical changes / 05-2023 / Conformity CE

